

viRalert 2

СИСТЕМА БЕСКОНТАКТНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА



LAND
AMETEK[®]
PROCESS & ANALYTICAL INSTRUMENTS



АО «ЛОИП»
Лабораторное Оборудование и Приборы

viRalert 2

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

АМТЕК LAND ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ВЫСОКОТОЧНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 1947 ГОДА.

Мы являемся профессионалами в области бесконтактного измерения температуры и контроля качества сгорания в различных отраслях промышленности, таких как металлургия, стекольная промышленность, производство электроэнергии, нефтехимии, цемента и других отраслях.

Возможность людей свободно перемещаться по миру и путешествовать способствует быстрому распространению инфекции по всему миру, поэтому способность обследовать людей на наличие повышенной температуры является ключевым инструментом снижения риска распространения заболеваний.

Стационарная тепловизионная система **viRalert 2** обеспечивает точное дистанционное измерение температуры человеческого тела (обычно лица), автоматически предупреждая оператора о потенциальных рисках.

Большинство бюджетных тепловизоров не могут достичь необходимой точности измерения, чтобы обнаружить небольшие изменения температуры, вызванные болезнью, но, сравнивая тепловое изображение с чрезвычайно точным калибровочным источником (абсолютным черным телом) в режиме реального времени система **viRalert 2** может



обеспечить точное и надежное измерение температуры человека. Данная система особо актуальна для мониторинга пешеходных зон, аэропортов, вокзалов, ключевых производственных объектов, фабрик, воинских частей и других мест, где легко распространяются инфекционные заболевания.

При обнаружении человека с повышенной температурой, система обеспечивает оповещение звуком и на экране, что позволяет легко принять решение о том, следует ли человеку пройти дополнительную проверку для допуска, не замедляя поток людей.

При установке на расстоянии 2 метра до цели система обеспечивает поле зрения 140 x 110 см.

Система viRalert 2 от АМТЕК LAND это точный и высокоэффективный способ измерения температуры тела человека.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ▼

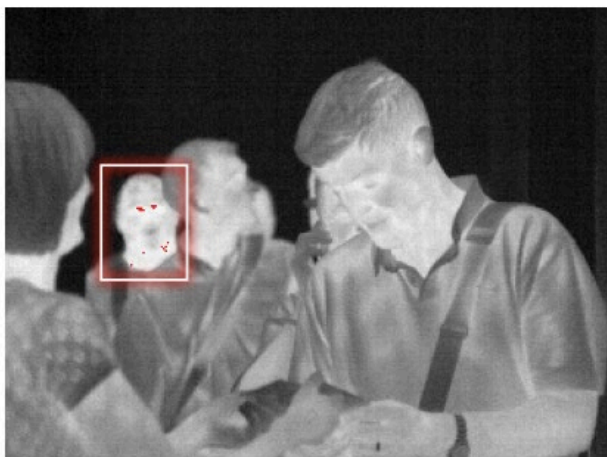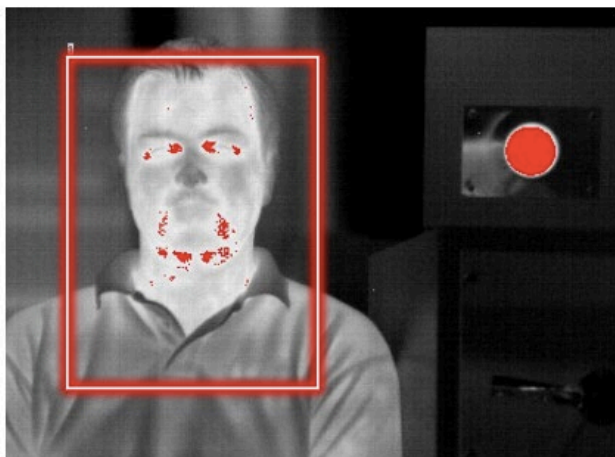


Технические характеристики



1: ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА

Измерение от 0 до 50°C, угол обзора 39x31°.

Разрешение 80 x 64 пикселей дает 5210 точек, каждая из которых содержит температурные данные.

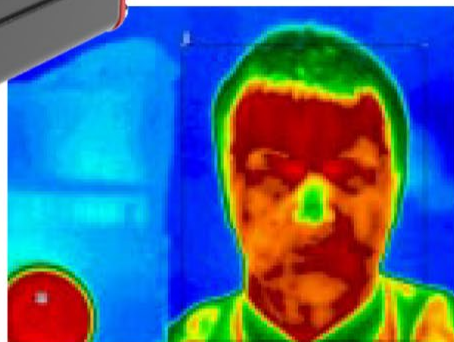

2: СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ТИПУ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО ТЕЛА (АЧТ)

Откалиброван до 38°C для чрезвычайно точных измерений. Включает в себя блок питания.

3: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И ШТАТИВ

Питание между камерой ноутбуком посредством Ethernet соединения (5 м).

4: УДОБНАЯ УСТАНОВКА

Комплект поставки включает в себя штатив для камеры и источника АЧТ для быстрого и удобного позиционирования с возможностью простого настенного и/или потолочного монтажа.

5: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Экран отображает нормальную температуру тела в черно-белом цвете, а аномально высокую температуру в красном цвете. Если обнаружена повышенная температура, то на экране появляется сигнал тревоги, дублирующийся звуковым сигналом. Поставка ноутбука для запуска программного обеспечения осуществляется по желанию Заказчика.




ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ ЗОНЫ - аэропорты, вокзалы, метро, остановки общественного транспорта


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ - школы, колледжи, ВУЗы, муниципальные библиотеки

БИЗНЕС - офисные здания


Камера viRalert 2

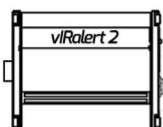

Кабель питания и Ethernet (5м)

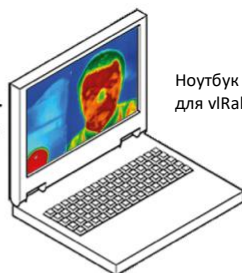

Ноутбук с ПО для viRalert 2

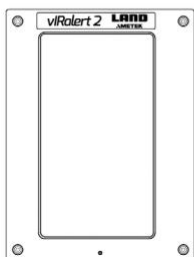

Источник калибровки АЧТ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мгновенное бесконтактное измерение с использованием инфракрасной технологии тепловидения с лидирующей на рынке точностью измерения температуры

Мониторинг повышенной температуры без замедления потока людей

Фиксированные дистанционные измерения сводят к минимуму риск передачи инфекции операторам.

Быстрая и простая установка и перемещение при необходимости с помощью простых креплений штатива.

Функция **автоматического оповещения** снижает вероятность человеческой ошибки и немедленно предупреждает оператора, если обнаружено критическое повышение температуры

Спецификация

КАМЕРА

Диапазон измеряемых температур:	От 0 до 50°C
Разрешение:	80 x 64 пикселей
Детектор:	Неохлаждаемая матрица термоэлементов
Длина волны:	От 8 до 14μm
Частота кадров:	20Гц
Температурное разрешение:	<0.12°C
Поле зрения:	39 x 31°
Требование к источнику питания:	5VDC (USB) от компьютера
Интерфейс:	Проводной Ethernet
ПО для обработки изображений:	Непрерывное или фиксированное изображение, показывающее нормальную температуру в черно-белом режиме и аномально высокую температуру в красном цвете. Визуальный (на экране) и звуковой сигнал тревоги, при обнаружении высокой температура.
Диапазон рабочих температур:	От 0 до 60°C

Источник АЧТ

Температура:	38°C
Коэффициент излучения:	0.97
Размер цели:	80мм диаметр (минимум)
Комбинированная точность / стаильность:	+/-0.2°C
Требование к источнику питания:	100-240V переменного тока, 2A (оставляется с адаптером питания 24 В постоянного тока)
Диапазон рабочих температур:	От 0 до 60°C

Запрос подробной информации и стоимости:

АО «Лабораторное Оборудование и Приборы» 193230, г. Санкт-Петербург
Пер. Челиева 12, литер А
Тел: +7(812) 336-2295, Факс: +7(812) 325-2824 eMail: Marina.Gushina@loip.ru;
info@loip.ru